



Facile manutenzione

Sterilizzazione semplice grazie al comodo distacco del motore

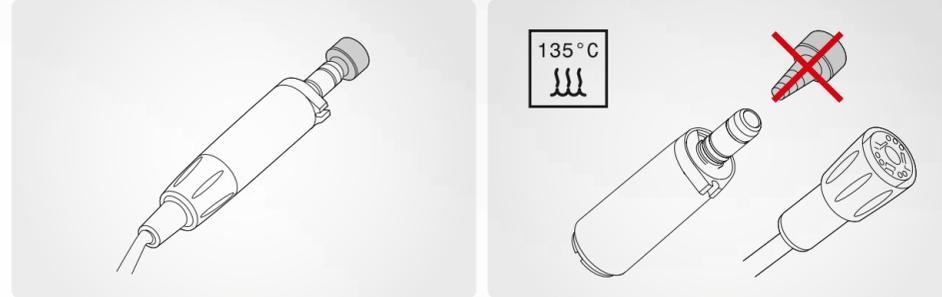

Facile da pulire grazie al comodo pedolino removibile

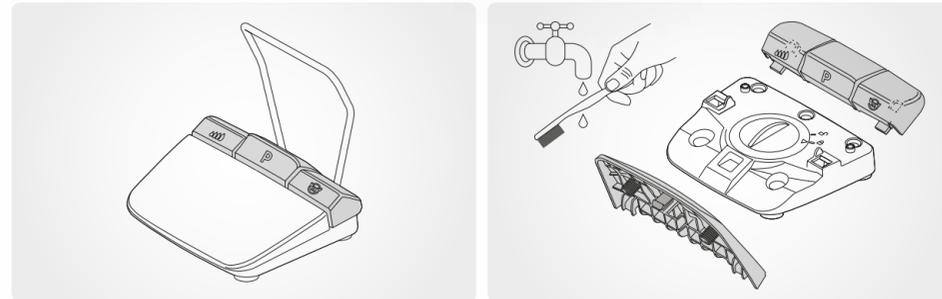

· Le migliori prestazioni possono essere mantenute quando si utilizza l'olio spray KaVo originale.



La scelta migliore per un trattamento ottimale


SM5

- Maggiore potenza in uscita
- Più compatto e leggero
- Torque costante indipendentemente dall'RPM



Maggiore **POTENZA!** Con motore ultra-compatto

- Più potente rispetto a INTRAsurg 300 Plus
- Motore piccolo e leggero per ridurre l'affaticamento chirurgico

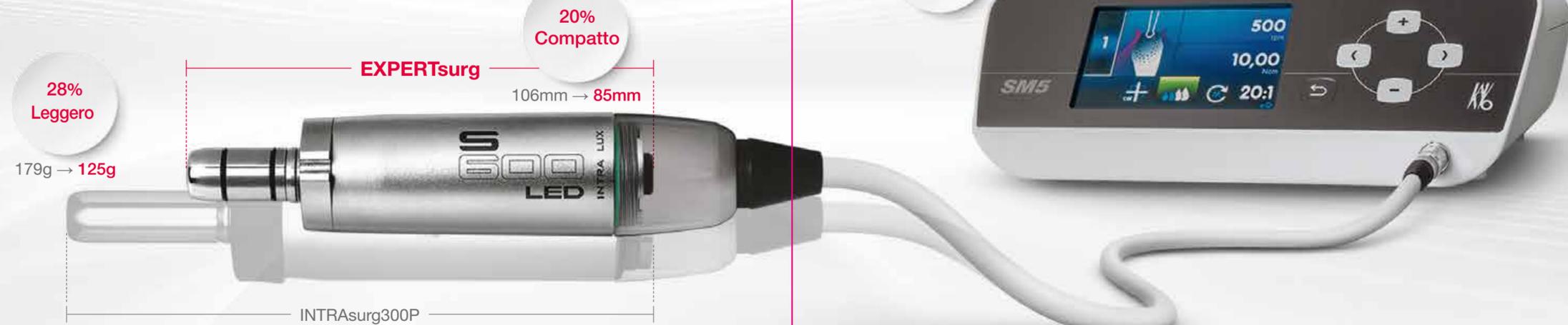


Cavi flessibili

- Cavi più sottili per un utilizzo più flessibile
- Maggiore durata del raccordo



Controllo intelligente del motore

- Elevata potenza anche a basse velocità, indipendentemente dall'RPM.
- Torque stabile mantenuto ad alta velocità per un intervento chirurgico in sicurezza

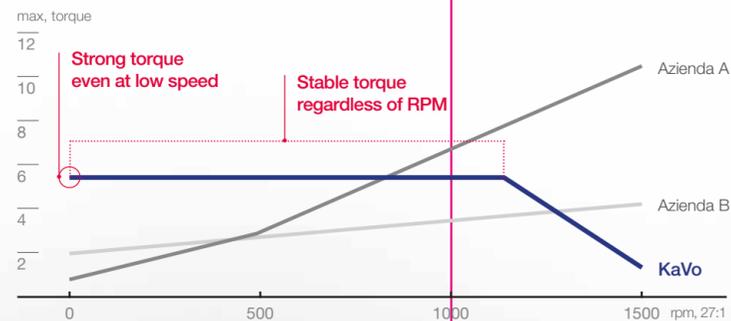

Auto-regolazione one-touch

- Regolazione anche per modificare il torque del motore senza alcuno strumento aggiuntivo
- Semplice applicazione del torque impostato inizialmente con un solo tocco



Strumenti chirurgici



Contrangolo 20:1

- Fresa rotonda e rimovibile
- Facile manutenzione grazie alla testina rimovibile
- Massima durata grazie all'ingranaggio ottimizzato della testina e al cuscinetto a sfera
- Può essere utilizzato con una testina piccola e con irrigazione interna/esterna

Veloc. Massima: 15 ~ 2,000rpm

※ Componenti principali: S201L

Manipolo diritto 1:1

- Può essere utilizzato con una fresa per manipolo di lunghezza standard da 44,5 mm e con una fresa per contrangolo.
- Utilizzato con irrigazione esterna

Veloc. Massima: 40,000rpm

Specifiche tecniche

Lunghezza x Larghezza x Altezza	265 x 255 x 100mm
Peso	1,9 kg (pedale 1,1 kg/ motore 125 g)
Tensione in ingresso	100 ~ 240v
Velocità RPM	300 ~ 40.000rpm
Massimo torque	80Ncm
Velocità della pompa	30 ~ 110ml/min
Lunghezza cavo	Comando a pedale 2.5m / Motore 2m