

Distribuito da:

OSSTEM[®]
IMPLANT



i9000

TUTTO per te

L'EVOLUZIONE DELLA
SCANSIONE INTRAORALE

MEDIT

TUTTO SULL' **INNOVAZIONE**

Medit i900 è stato progettato pensando al tuo comfort. Leggero e compatto, offre una scansione più fluida e una migliore precisione.

Il modo più intelligente e semplice di lavorare.

TouchBand

- Luce e feedback tattile in tempo reale
- Rotazione a destra e a sinistra

Puntali scanner

- Diverse dimensioni per un maggiore comfort per il paziente

Sensore Intelligente

- LED e feedback tattile



TouchPad

- Azioni di comando personalizzabili
- Facile navigazione

Pre-riscaldamento rapido

- Subito pronto per la scansione

Motore ottico di terza generazione

- Tecnologia di imaging a 10 bit

Leggero & Compatto

- 165 g. di peso
- 233 mm. di lunghezza

Design a corpo unico

- Perfetto bilanciamento
- Nessun rischio biologico
- Cavo rinforzato



TouchBand™ & TouchPad



Convenienza e portabilità
senza pari




TUTTO SULLA **PERFORMANCE**

Nuovo motore ottico di terza generazione


Il motore ottico avanzato di i900 con imaging a 10 bit rivela colori ricchi e vivaci, garantendo immagini chiare e precise per catturare ogni dettaglio in modo impeccabile.

La maggiore densità d'immagine e l'aumento della profondità di scansione garantiscono un perfetto ed efficace risultato.

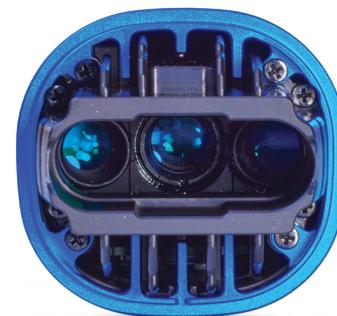


TUTTO SULLA **PRECISIONE**

Il motore ottico all'avanguardia permette di superare gli ostacoli della scannerizzazione come i metalli e le zone edentule.

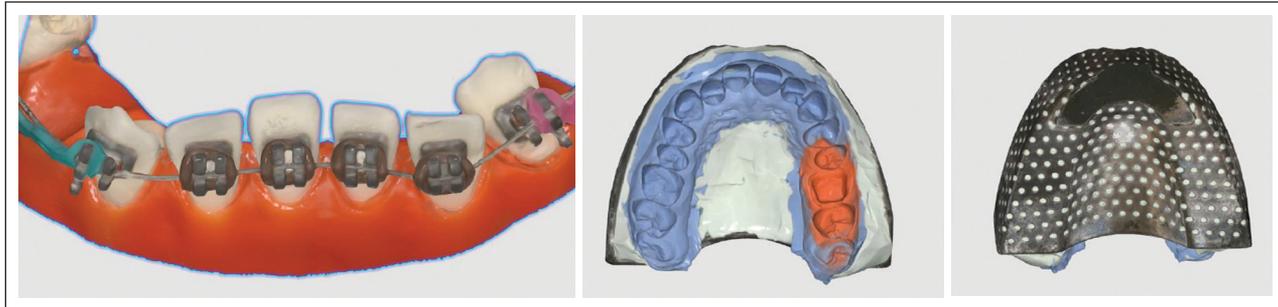

L'area di scansione più ampia garantisce un'acquisizione rapida e completa dei dati, rendendo i900 la scelta ideale per i casi di edentulia.

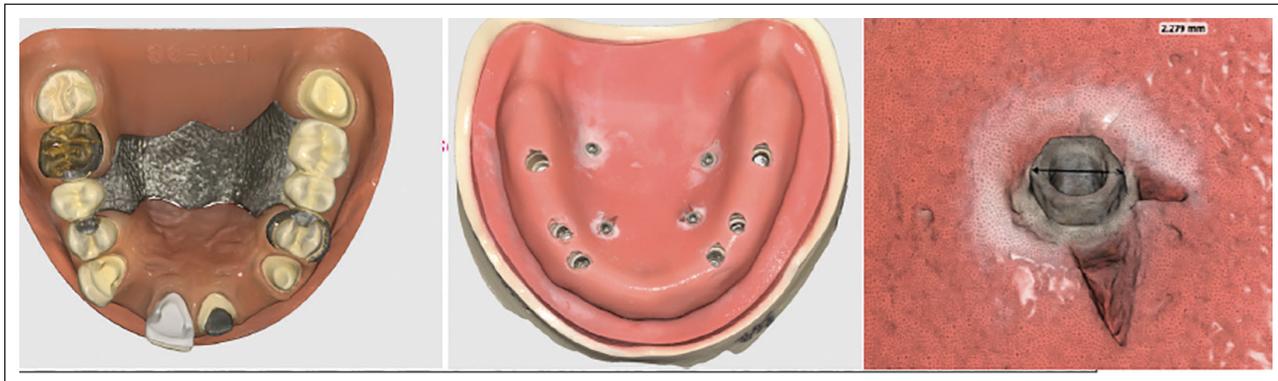

TUTTO SUL CONTROLLO

Con un design leggero ed ergonomico, i900 permette a chiunque nella vostra clinica di scansionare con una facilità senza pari.

Un campo visivo più ampio cattura un'area più vasta con il minimo sforzo, garantendo velocità e precisione in ogni sessione.

Il nuovo design assicura un equilibrio perfetto ed elimina i problemi di contaminazione.

Comfort

Puntali di diverse misure per un trattamento personalizzato.



S: 17.9 x 13.1mm
M: 21.8 x 16.3mm
L: 26.7 x 19.7mm



Rivoluzionario TouchBand & TouchPad Funzionale

Migliorate la vostra esperienza con un TouchBand e un TouchPad intuitivi.

L'innovativo TouchBand a 360° offre una facile navigazione con feedback tattile. Il funzionamento senza pulsanti offre un controllo preciso da qualsiasi angolazione e consente di avviare e interrompere facilmente la scansione.

Ergonomico con navigazione intelligente

Leggero, Compatto, Portatile

Con i suoi 165 grammi è nato per facilitare la scansione e offrire una libertà di movimento senza limiti.

Indicatori LED


Gli indicatori LED sul fondo permettono una visibilità vivida e rapida dello stato dello scanner, semplificando ulteriormente la vostra attività.



TUTTO SULLA CONVENIENZA

Vivete al meglio l'esperienza con Medit i900

La soluzione di scansione completa per il vostro studio. Ogni i900 viene fornito con un laptop ottimizzato, il che significa che non dovrete mai preoccuparvi di modifiche al software o di prestazioni non ottimali. Inoltre, ogni i900 è supportato dall'assistenza diretta di Medit e da una garanzia di 3 anni, per garantirvi la massima tranquillità.

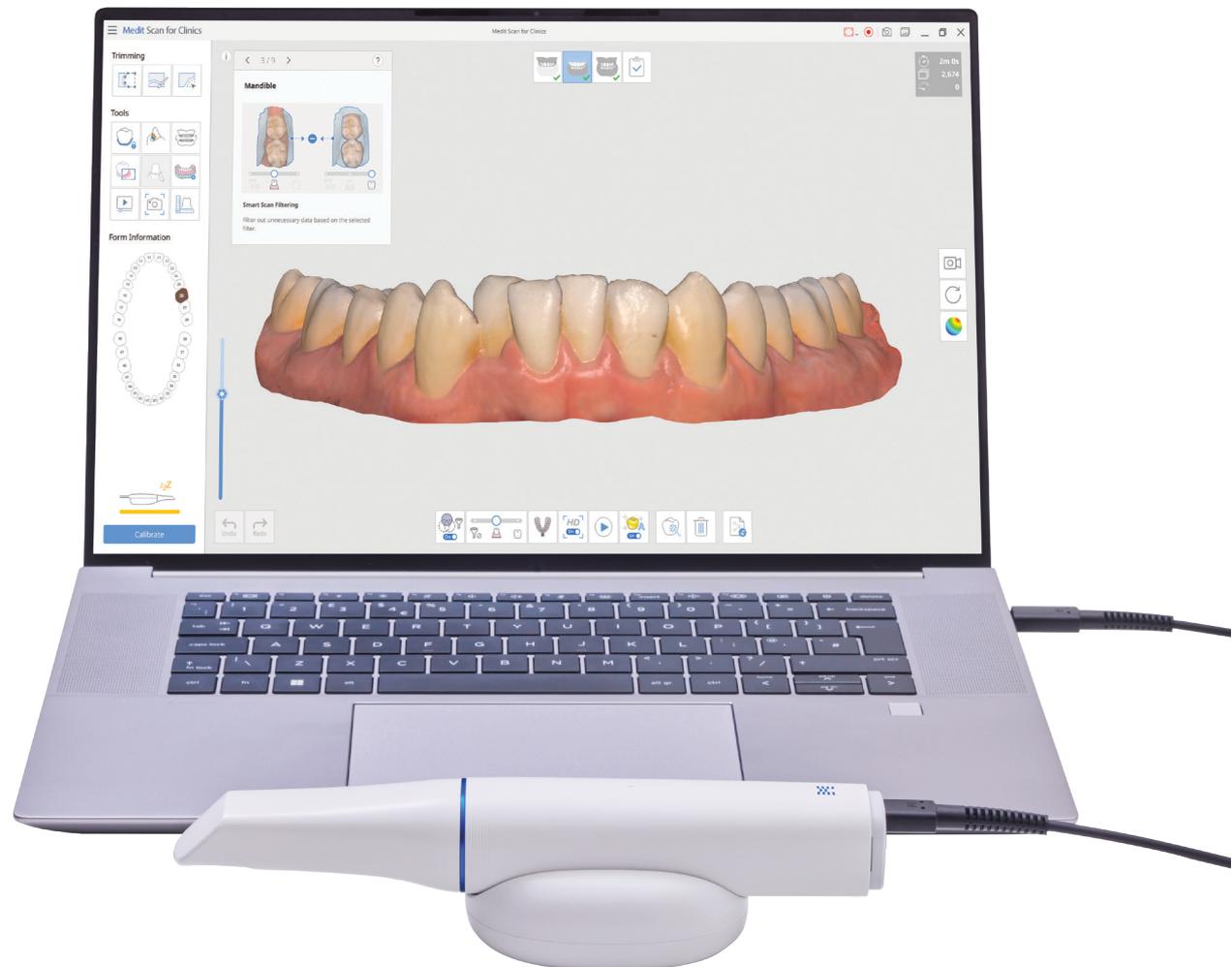

Semplice da configurare. Puoi iniziare la scansione subito dopo.

ALL IN One Package




- Manipolo e supporto i900
- Quattro puntali per manipolo in due dimensioni
- 2 cavi flessibili
- Computer portatile preconfigurato con Medit Link installato
- 3 anni di garanzia e assistenza diretta da parte di Medit per avere la massima tranquillità

Integrazione perfetta

Medit Link, il sistema completamente aperto, che integra i900 con il software dello studio esistente, migliorando i flussi di lavoro senza complicazioni. Si evolve costantemente con aggiornamenti software continui e per migliorare le funzioni intelligenti, le consultazioni dei pazienti e la comunicazione con i laboratori.

MEDIT Link

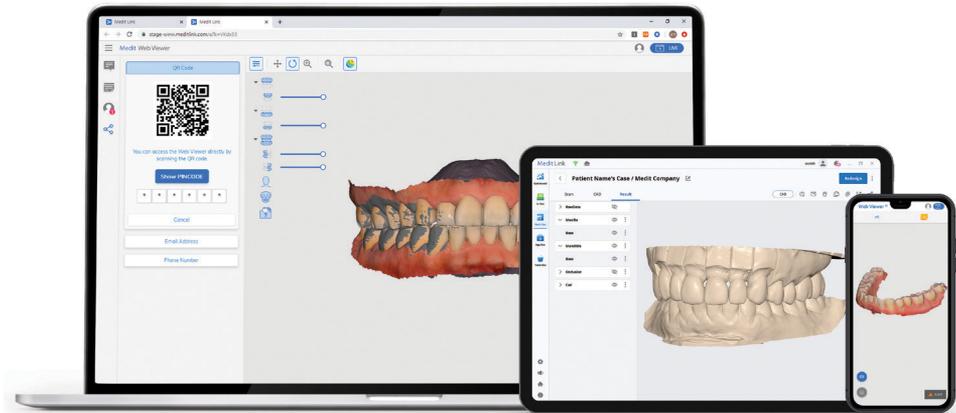



TUTTO PER LA
CURA

Una migliore esperienza per il paziente

i900 vi permette di concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: fornire un'assistenza eccellente ai pazienti. Le scansioni dettagliate aumentano l'accettazione del trattamento e riducono le modifiche del laboratorio, in modo che i pazienti ottengano rapidamente un risultato ottimale. Inoltre, le diverse dimensioni dei puntali consentono il massimo comfort per il paziente.

Specifiche

| Categoria | Medit i900 | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Tecnologia di scansione | Velocità di acquisizione | Fastest |
| | Tecnologia imaging | 3D in-motion video technology/ 3D full-color streaming capture |
| | Tecnologia | Adaptive anti-fogging |
| | Camera | 10 bit |
| Precisione | Full-arch | 10.9 µm ± 0.98 |
| Manipolo | Dimensioni | 223.4 x 36.7 X 35.3mm |
| | Peso totale | 165g |
| Puntali | Misure | L: 26.7 x 19.7mm M: 21.8 x 16.3mm S: 17.9 x 13.1mm (venduto separatamente) |
| | Campo visivo (Risoluzione) | L: 18 x 15mm (552 x 460 px) M: 14 x 11.5mm (428 x 352 px) S: 10 x 8 mm (308 x 252 px) |
| | Autoclavabile | Più di 150 volte Autoclave 121°C 30 mins Autoclave 134°C 4 mins Autoclave 135°C 10 mins |
| | Materiale | PPSU Polyphenylsulfone (utilizzato principalmente per i biberon) |
| | Puntale reversibile | No |
| Cavo | C Power Delivery: 2m & 2.5m | |



i9000

Medit i900 non è solo una tecnologia avanzata.
Non ci sono costi nascosti o abbonamenti: solo un unico pacchetto con tutto
ciò che serve per ottimizzare i flussi di lavoro e la cura dei pazienti.

Facciamo TUTTO per il vostro successo.

Distribuito da:

OSSTEM[®]
IMPLANT

OSSTEM ITALIA S.R.L.
Via Gallarate, 211 - 20151 Milano
Tel. +39 0238247387 - email: info@osstem.it

www.Medit.com | © Medit 2024